

新規Windows 10システムに手持ちのODFソフトウェアインストール

2020年02月25日

*HelperTex Office*

## 概要

方位解析が動作しているシステムのOSをWindows 7からWindows 10へupgradeした場合の各種ODFソフトウェアを扱ったが、新規Windows 10システムに手持ちのODFソフトウェアをインストールする問題点をチェックしました。

## 調べるソフトウェア

LaboTex 3.0

TexTools

StandardODF

CTRソフトウェア

## Windows 10

Windows 7-64bitをWindows 10へupgradeしたシステム



## LaboTex 3.0

USBKeyドライバーがWindowsの影響を受けます。

LaboTexのバージョンにより、CDに添付されているドライバーが異なります。

現在ご使用のLaboTexのバージョンを調べてください。

LaboTexのバージョンは、以下の方法で調べます。

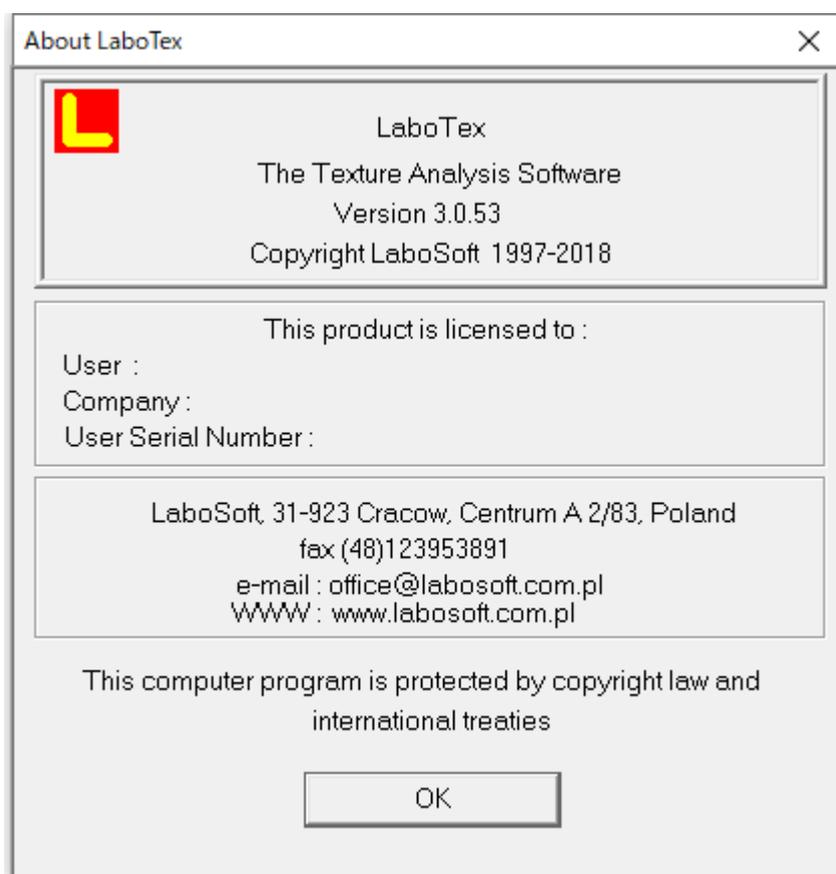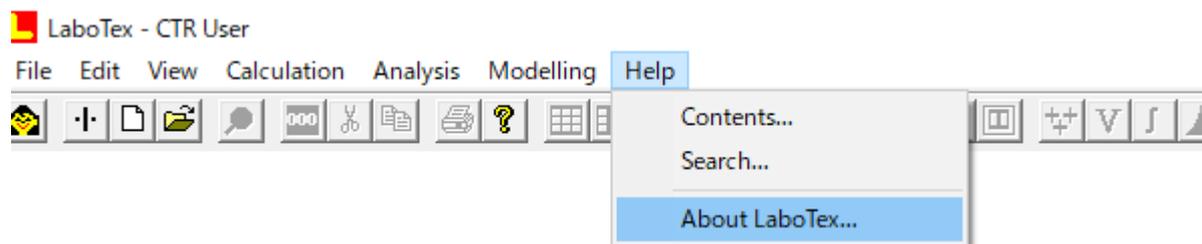


Windows 10で動作するUSBKeyドライバーは3.0.51以降です。

以前の場合、最新のドライバーが必要になります。


## TexTools

TexToolsのCDROMには2種類あります。

### 初期のCDROM

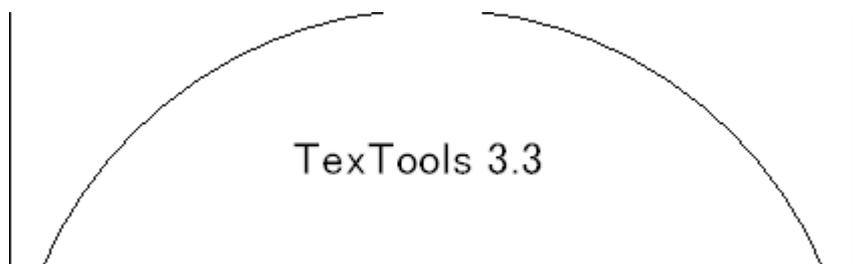

### Copy 防止 CDROM

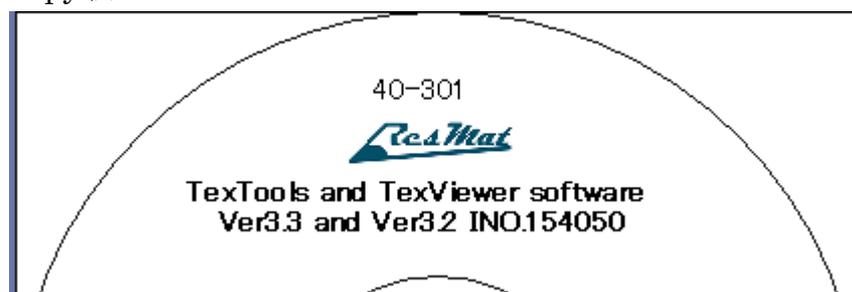

初期CDROMはそのまま、インストール可能  
Copy 防止 CDROM の場合、問い合わせください。

## StandardODF

StandardODF のインストールには VB の runtime が必要です。  
最新の VB をインストールした後、StandardODF をインストール  
してください。

### vb6sp6 セットアップ ウィザードへようこそ



インストーラは vb6sp6 をコンピュータ上にインストールするために必要な手順を示します。

継続するためには「次へ」をクリックしてください。

警告: このコンピュータプログラムは、日本国著作権法および国際条約により保護されています。このプログラムの全部または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると著作権の侵害となりますのでご注意ください。

キャンセル(C)

戻る(P)

次へ(N)

## CTRソフトウェア

CTRソフトウェアは、C:ドライブのボリュームシリアル番号でプロテクトされています。  
手持ちのCDROMをインストールしても、新しいコンピュータでは動作しません。

### 新しいコンピュータの場合

#### CTRソフトウェアCDROMをお持ちの場合

##### コンバート

手持ちのソフトウェアを新しいコンピュータに移植

ボリュームシリアル番号ファイルを取り寄せインストール

##### サイトライセンス

最新のCTRソフトウェアを新しいコンピュータに導入

最新ソフトウェアと説明書CDROMを取り寄せ

#### CTRソフトウェアCDROMがなく、新規の場合

##### CTRフルパッケージの購入

従来のコンピュータをWindows 7からWindows 10にupgrade

CTRソフトウェアはそのまま使えます。

最新のCTRソフトウェアに入れ替える場合、アップデート扱いになります。

## 他のODFソフトウェア

### popLA

64bitでは動作しません。

### MTEX

MATLABがインストールされれば、MTEXは動作します。

逆極点図をExportする場合、C:\CTR\MTEX をパスに追加してください。