


ODF 解析結果の Fiber プロファイルの比較

# FiberMultiDisplay

Ver.1.03M

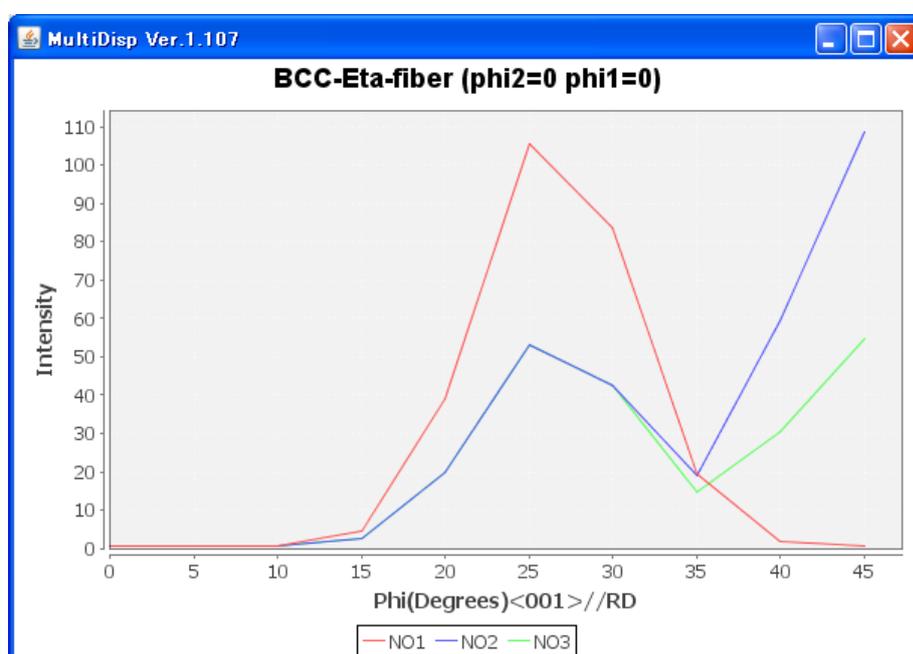

2019年07月28日



HelperTex Office

## 概要

ODFDisplayソフトウェアは各種ODF解析結果からBCC, FCCのFiberの表示機能がある。また、表示したFiberプロファイルをFiberディレクトリにテキストデータとしてファイルが作成される。この作成されたテキストデータを基に、試料間の比較を行う。同時に指定できるFiberプロファイルは同一Fiberになります。


## プログラム



複数のFiberファイルを個々に選択し、表示名を変更してプロファイルを表示する。

## 表示プロファイルの作成


ODFDisplayでFiber解析を行う。

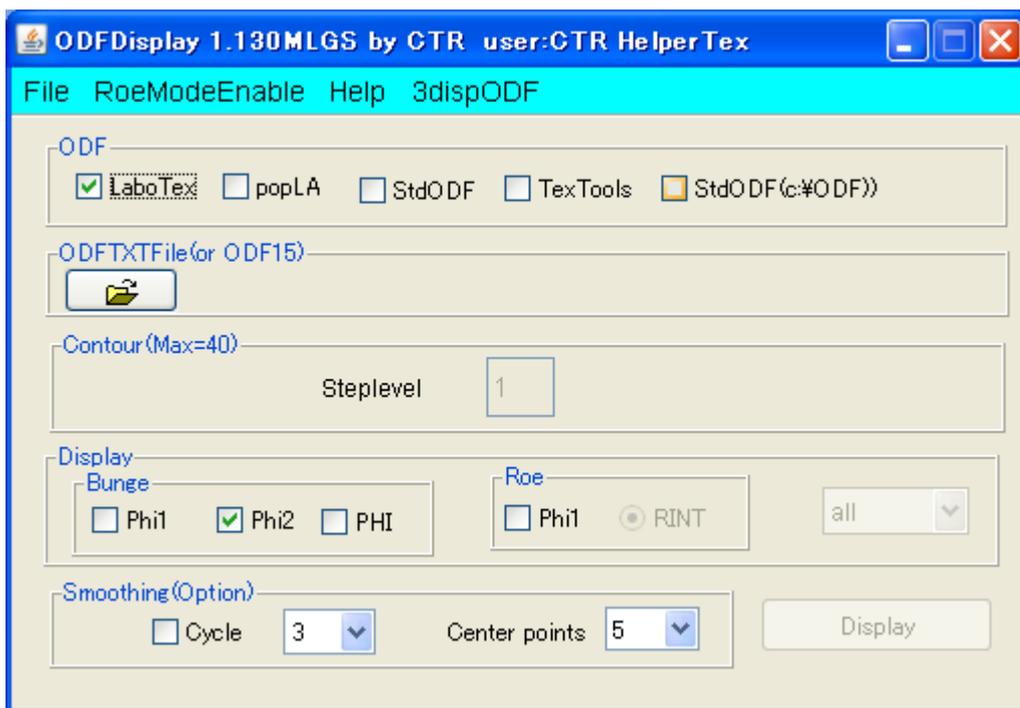


LaboTexでExportしたODF結果からFiber解析を行う。

D:\ODFFiber\N01\N01-ODF.TXT  
C:\ODFFiber\N02\N02-ODF.TXT  
C:\ODFFiber\N03\N03-ODF.TXT


ODF解析結果をExportしておいて

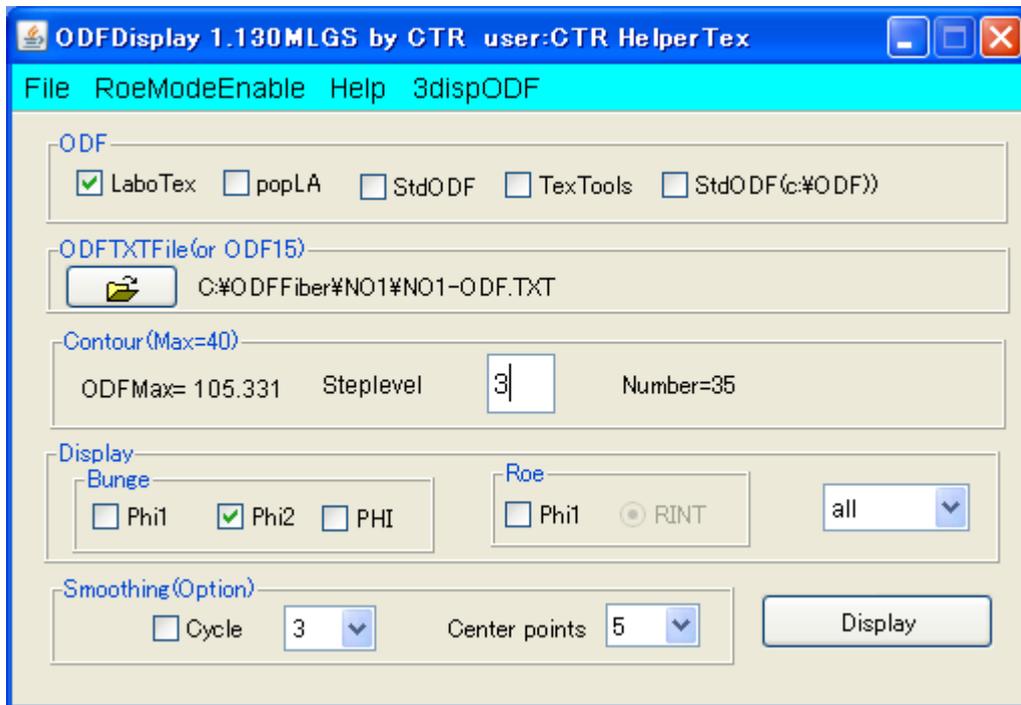


個々にODFを表示 (Display)

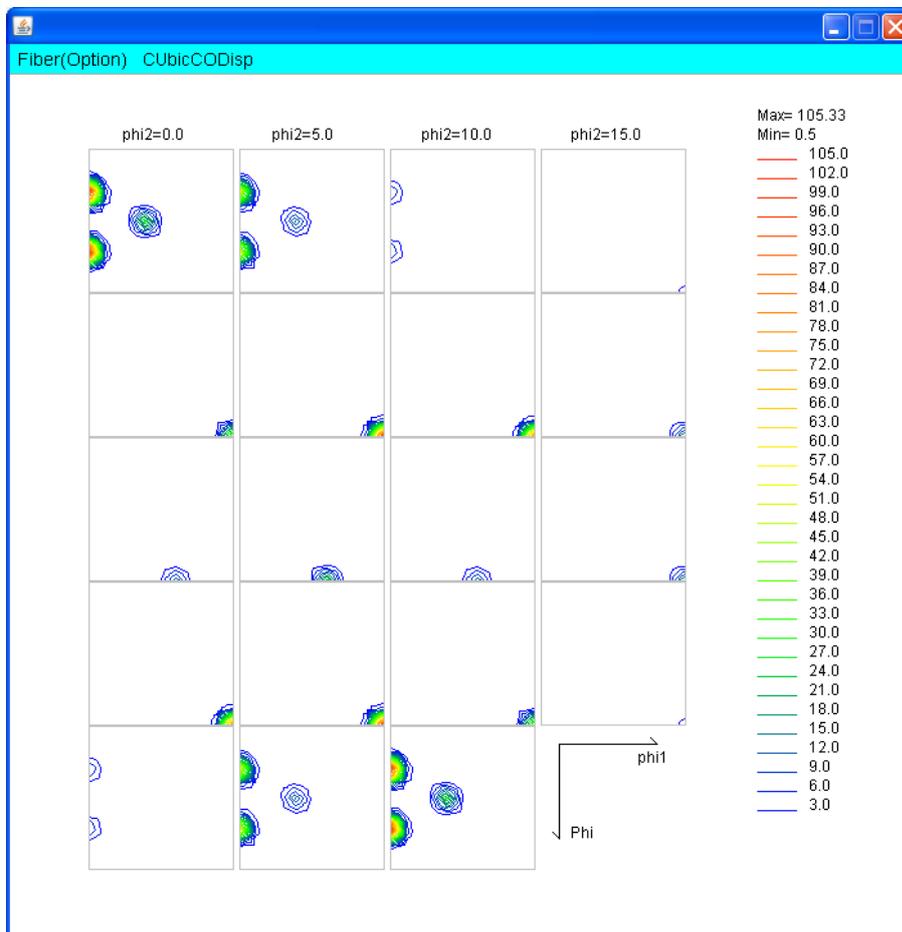

メニューFiberから

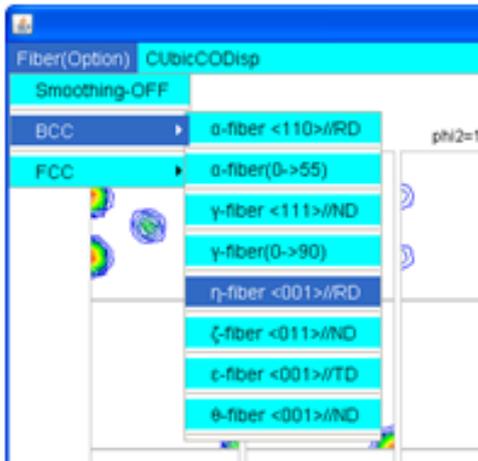

BCC- $\eta$ -Fiberを選択

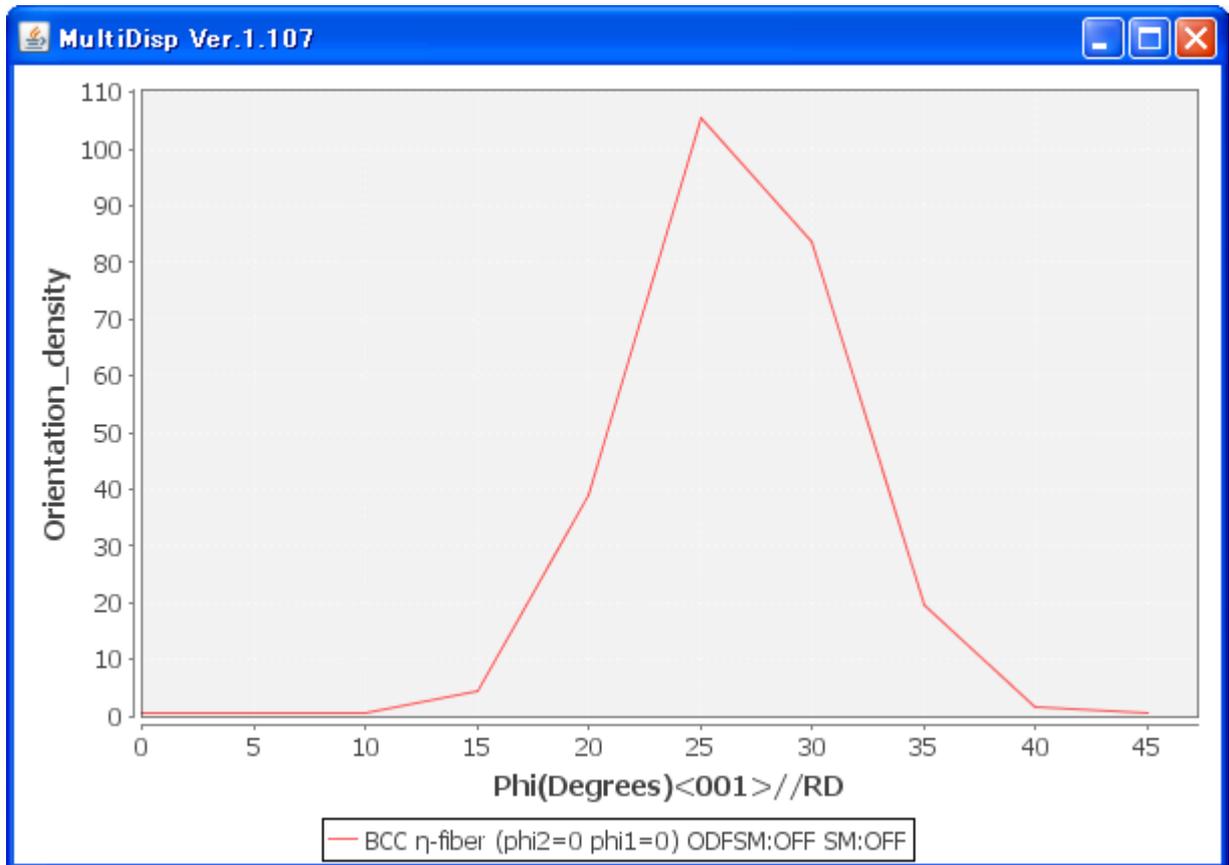


プロファイルが表示される。

```
C:\%ODFFiber%N01\FIBER%BCC-Eta-fiber45-ODFSMOFF-SMOFF.TXT  
C:\%ODFFiber%N01\N01-ODF.TXT  
C:\%ODFFiber%N02\N02-ODF.TXT  
C:\%ODFFiber%N03\N03-ODF.TXT
```

同じように、NO2, N03も $\eta$ -Fiberを表示する。

```
C:\%ODFFiber%N01\FIBER%BCC-Eta-fiber45-ODFSMOFF-SMOFF.TXT  
C:\%ODFFiber%N01\N01-ODF.TXT  
C:\%ODFFiber%N02\FIBER%BCC-Eta-fiber45-ODFSMOFF-SMOFF.TXT  
C:\%ODFFiber%N02\N02-ODF.TXT  
C:\%ODFFiber%N03\FIBER%BCC-Eta-fiber45-ODFSMOFF-SMOFF.TXT  
C:\%ODFFiber%N03\N03-ODF.TXT
```

作成されているF i b e rプロファイルファイルを選択する。

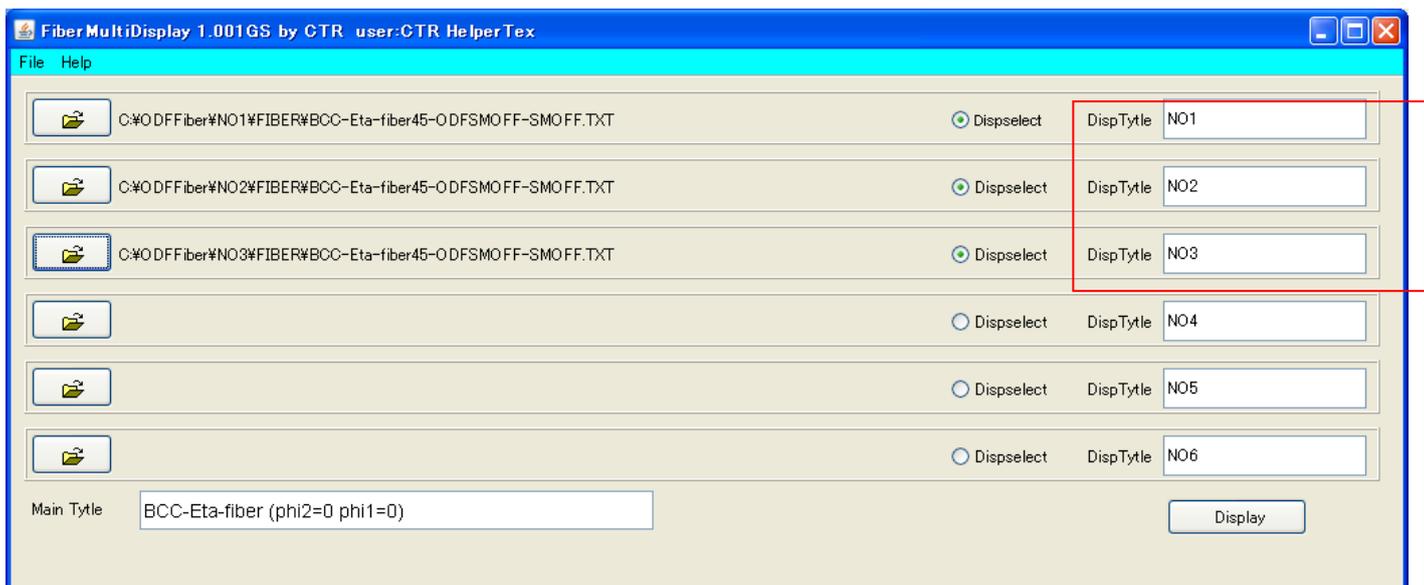

表示T y t l eを変更してD i s p l a y

