

d e f o c u s 確認のための

R e v e r s e D e f o c u s ソフトウェア

Ver1.05

2020年07月23日

HelperTex Office

概要

本ソフトウェアは、`Defocus` 機能を確認するために作成されたソフトウェアで `defocus` 補正の逆計算を行う。入力ファイルは、`TXT2` であり、計算されたファイルも `TXT2` とする。

使い方

`LaboTex` で複数の結晶方位を計算した ODF 図から極点図を `Export` する。


`Make Pole File` ソフトウェアで `TXT2` に変換

本ソフトウェアで逆 `defocus` を施す。

`Pft to ODF 2` ソフトウェアを介して ODF に読み込ませる。

`Error Rp %` を確認する。

再度 ODF 図から再計算極点図を `Export` し、`Value ODF` で確認

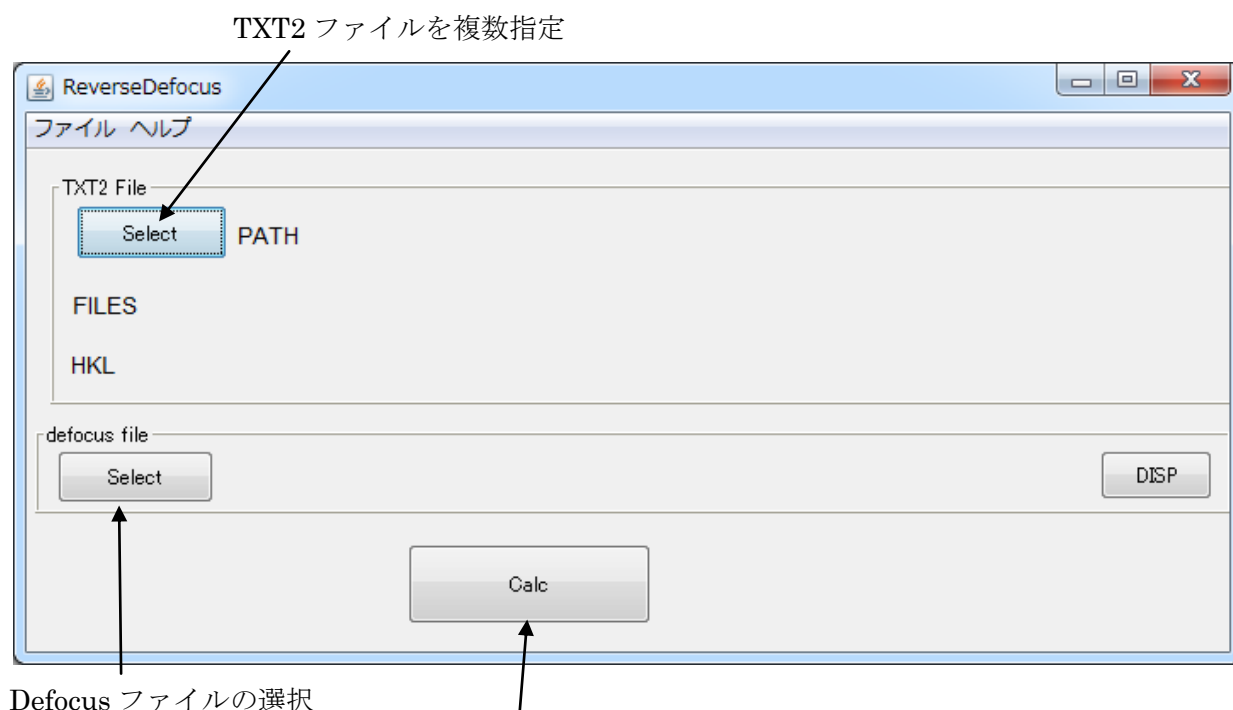

Defocus ファイルの選択

逆 `defocus` 補正を行い、`REVERSE` ホルダに `TXT2` ファイルを作成する